









Profesionální systém monitorování hladiny glukózy v krvi rychlý • jednoduchý • přehledný




SEJOY BG-710b

Moderní glukometr je určen pro **měření hladiny glukózy v kapilární krvi** odebrané z prstu. Poskytuje **rychlé a spolehlivé výsledky** pro každodenní kontrolu glykémie.

-  Výsledek měření do **5 sekund**
-  Bluetooth propojení s mobilní aplikací **GlucoJoy** 
-  **Automatický přenos** naměřených hodnot do telefonu
-  Paměť až **1 000 výsledků** s datem a časem
-  Přehledné průměry za 7 / 14 / 28 dní
-  Testovací proužky **bez nutnosti manuálního kódování**
-  Kalibrace na plazmatický ekvivalent



Hrazen zdravotní pojišťovnou
(SÚKL/VZP kód 5017236)
dostupný také pro samoplátce

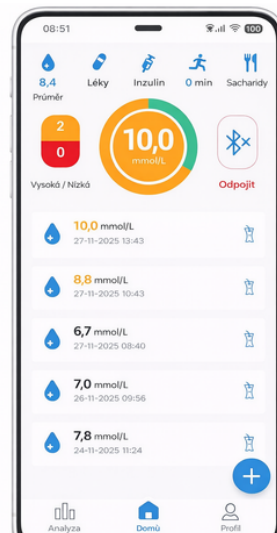

Vhodný pro domácí selfmonitoring i využití ve zdravotnickém prostředí.

Klinická přesnost a spolehlivost měření

Glukometr BG-710b splňuje požadavky normy **DIN EN ISO 15197:2015** pro systémy monitorování glukózy v krvi. Hodnocení přesnosti bylo provedeno nezávislým institutem IDK.

Kalibrace na plazmatický ekvivalent umožňuje srovnatelnost výsledků s laboratorními metodami.


Rozsah hematokritu 0–70 % zajišťuje spolehlivé měření u širokého spektra pacientů.



Glukometr SEJOY BG-710b



Testovací proužky BS-602
50ks v 1 balení

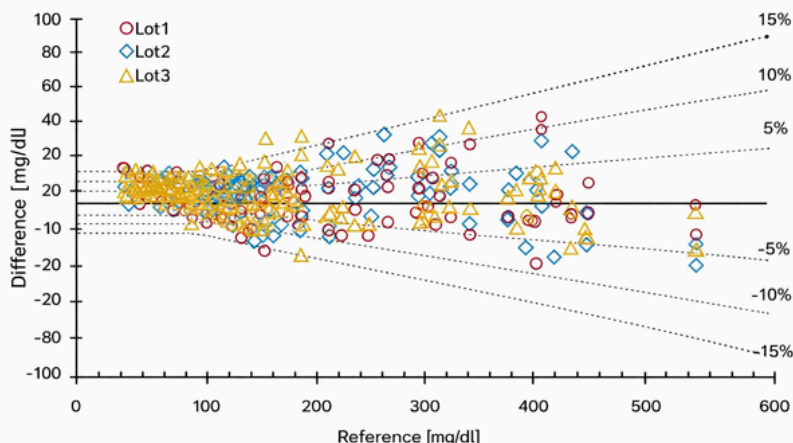

Technické specifikace

- ✓ **Metoda měření:** elektrochemická (GDH biosenzor)
- ✓ **Rozsah měření:** 0,5–33,3 (mmol/L)
- ✓ **Velikost vzorku:** cca 0,6 µl
- ✓ **Doba odezvy:** 5 sekund
- ✓ **Paměť:** až 1 000 výsledků s datem a časem
- ✓ **Rozsah hematokritu:** 0–70%
- ✓ **Napájení:** 2× AAA baterie
- ✓ **Provozní teplota:** 5–45 °C
- ✓ **Rozměry přístroje:** 94,9 x 56,5 x 22,8 mm (d x š x v)
- ✓ **Hmotnost:** cca 50,6 g (bez baterií)

Postup měření

Měření je určeno k orientační kontrole hladiny glukózy v krvi.

1) Vložte testovací proužek do glukometru



2) Odběr kapilární krve



3) Přiložte kapku krve na testovací proužek



4) Odečtěte výsledek do 5 sekund



Aplikace je aktuálně dostupná v **angličtině** a dalších 5 světových jazycích.
Pro účely tohoto letáku byly obrázky aplikace přeloženy do češtiny.

GlucoJoy
Mobilní aplikace

Stáhnout v
Google Play

Stáhnout v
App Store



Digitální správa dat

Po spárování přes Bluetooth umožňuje aplikace automatický přenos naměřených hodnot do mobilního telefonu.

Aplikace nabízí:

- přehled historie měření
- grafické zobrazení trendů
- souhrnné reporty
- možnost sdílení výsledků

Používání aplikace je volitelné.