

- snadnější správa diabetu
- přenos naměřených hodnot **bez použití čtečky**
- výsledky automaticky každé 3 minuty
- připojení pomocí Bluetooth
- **první** 15denní systém kontinuálního monitorování na světě
- **volně dostupný** v lékárnách
- pacienti s **diabetem 1. typu** mají nárok na **plnou úhradu** zdravotní pojišťovnou



balení obsahuje:

1 senzor, 1 aplikátor, 1 rychlý průvodce

- bez píchání do prstu
- bez kalibrace
- bez použití čtečky
- 15denní senzor



iCan CGM aplikace

Pro připojení v reálném čase, generujte a sdílejte.



iCan Reach aplikace

Můžete sdílet s 10 přáteli nebo rodinou.



www.icansenzor.cz

www.senzornaglukozu.cz

Veškerá sdělení mají pouze informační charakter, bez záruky správnosti jeho obsahu. QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o., neručí za správnost obsahu z důvodu možných tiskových a redakčních chyb. **Reklama je určena pro odborníky.** Pozorně si přečtěte návod k použití. Použití obrázků a textů není bez předchozího souhlasu dovoleno. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání 10/2024 © 2024 QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o.



informace a objednávky:
QUICKSEAL INTERNATIONAL, s. r. o.
Korytná 47, 100 00 Praha 10
info@icansenzor.cz
servis@icansenzor.cz


www.quickseal.eu
www.icansenzor.cz
+420 234 142 105
f iCanczech
@ ican_czech

iCan i3 CGM

VAŠE **NOVÁ** VOLBA PRO SPRÁVU DIABETU

15DENNÍ SENZOR BEZ ČTEČKY
PRO KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ GLUKÓZY

VŽDY
MÁTE
KONTROLU

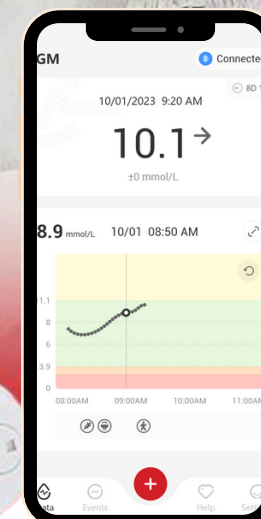

15
denní

sledujte
glukózu
v reálném
čase



pohodlný
a prodyšný




voděodolný
a odolný proti potu




dlouhotrvající



hypoalergenní

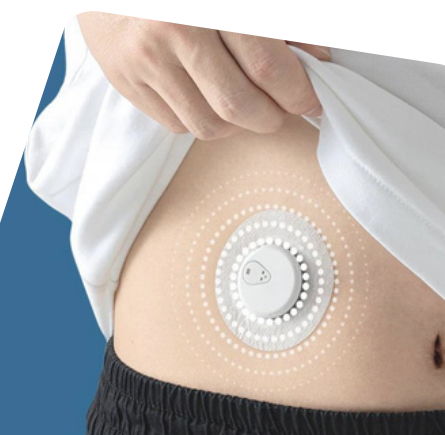

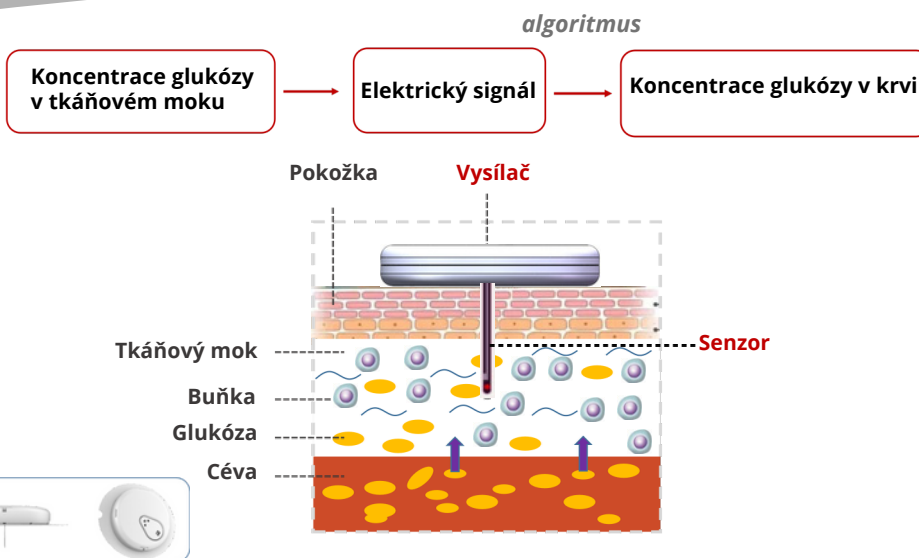

Aplikace iCan i3



Sestavte sadu senzoru a aplikátoru




Senzor se aktivuje po odpojení od magnetu montážní sestavy.




Bezpečnostní zámek zabráňující nechtěnému vložení



Instrukce ke stažení

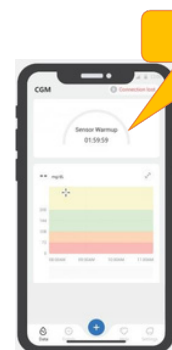


zahřátí senzoru

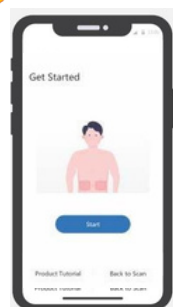


Informace o aplikaci


Režim „Více denní“

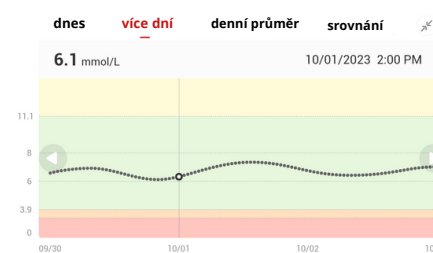


Režim „Denní průměr“

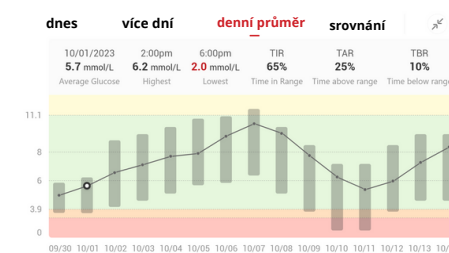


Režim „Srovnání“

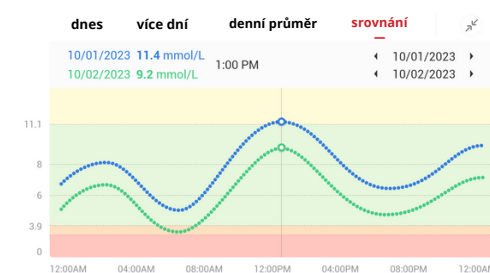



Měření inzulínu

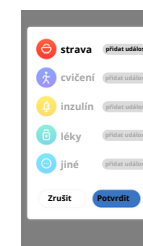

Přizpůsobení upozornění

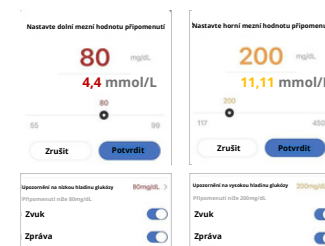

15 dní
nejdelší
životnost

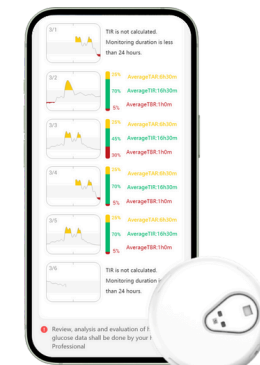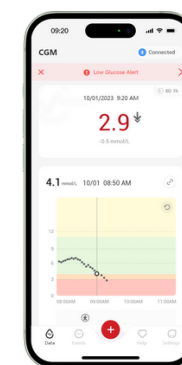

připojení přes Bluetooth



Na obrázku nahoře je domovská obrazovka z aplikace pro iOS. Aplikace pro Android vypadá podobně.



Trendová šipka: Stabílní
Hladina glukózy se mění, ale méně než 0,16 mmol/L za 3 minuty.

Trendová šipka: pomalu stoupá nebo klesá
Hladina glukózy se pomalu mění, více než 0,16 mmol/L nebo až 0,33 mmol/L za 3 minuty.

Trendová šipka: Rychle stoupá nebo klesá
Hladina glukózy se rychle mění, více než 0,33 mmol/L nebo až 0,5 mmol/L za 3 minuty.

Trendová šipka: Rapidně stoupá nebo klesá
Hladina glukózy se velmi rychle mění, více než 9 mg/dL (0,5 mmol/L) za 3 minuty.

Komponenty CGM Sinocare iCan i3

Intuitivní aplikace pro iCan i3

Senzor



Sterilní balení senzoru

Po sestavení s aplikátorem lze senzor zavést subkutánně.

Aplikátor



Balíček aplikátoru

Sbírejte hodnoty glukózy každé 3 minuty a odešlete do mobilní aplikace prostřednictvím Bluetooth s nízkou spotřebou energie.

iCan CGM aplikace



APP iCan Health

aplikace je k dispozici pro iOS i Android



Celé balení **iCan i3** jednorázového senzoru a aplikátoru

Jeden
senzor

7160 výsledků

S aplikací iCan CGM

můžete sledovat:

- svou hodnotu glukózy
- zobrazovat trendy a zprávy
- sdílet data s rodinou, přáteli a HCP kdekoli a kdykoli.

S aplikací iCan Reach

může váš partner nebo pečovatel sledovat vaše údaje:

- o hodnotách glukózy
- trendy
- dostávat upozornění, když s nimi sdílíte svá data.

